



保管用

保証書付

【電動歯間ブラシ】

DENTAL PECKER


ELECTRIC INTERDENTAL BRUSH

デンタルペッカー DP-10

取扱説明書

このたびは「デンタルペッカー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

各部の名前

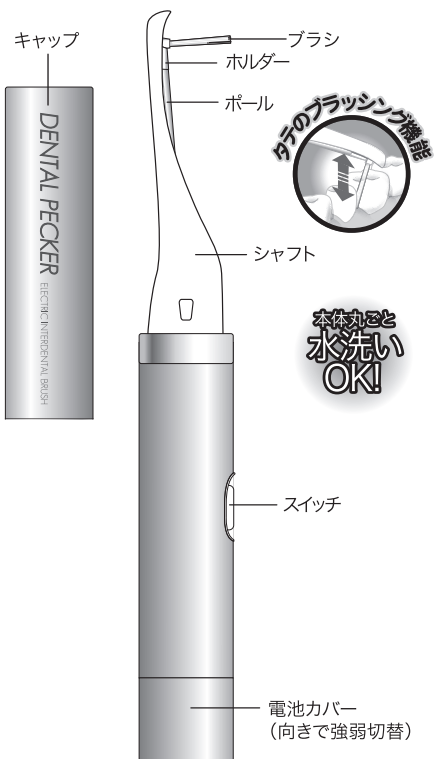

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りください。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容です。
		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。

※物的損害とは家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します

	警告	歯肉炎、歯周病の方は出血することがあります。お客様の歯ぐきが弱まっていると思われる場合があります。使用時の出血は3～7日程度様子を見ながらご使用ください。それでも歯ぐきから出血が続く場合、または多量の出血などの異常があらわれた場合は、歯科医にご相談ください。原因が他の病気の可能性があります。
	必ず守ること	口内または歯周について、手術を受けて間もない方、現在治療中の方、傷や炎症などの異常がある方、歯周炎・歯肉炎のひどい方は歯科医にご相談のうえ、ご使用ください。 ●刺激により、傷口を悪化させるおそれがあります。
	必ず守ること	ブラシホルダーがポールに確実に差し込まれていることを確認してからご使用ください。 ●作動時にブラシがはずれて思わぬケガをするおそれがあります。
	必ず守ること	万一、電池から漏れた液が目に入ったり、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流してください。 ●失明やけがの原因になります。医師の治療を受けてください。

	警告	小さなお子様だけでのご使用や、小さなお子様の手の届く場所での保管はおやめください。 ●乳幼児が飲み込むなど、事故やケガの原因になります。万一口内に入った場合は、すぐに医師に相談してください。
	禁止	ブラシは複数人で併用しないでください。 ●病原菌が感染する原因になります。
	禁止	あおむけやそれに近い姿勢で使用しないでください。 ●ブラシがはずれた場合、誤飲するおそれがあります。
	禁止	アルカリ単4形乾電池以外の乾電池は使用しないでください。 ●本体の故障や破損、事故、ケガの原因になります。
	禁止	ぬれた手で乾電池を交換しないでください。 ●感電やケガの原因になります。
	分解禁止	改造しないでください。また、修理技術者以外は分解したり修理をしないでください。 ●思わぬ事故、トラブルの原因になります。修理はお買い上げの販売店または山善サポートセンターにご相談ください。

	注意	ご使用中に違和感を感じる場合は、歯科医にご相談の上、ご使用ください。
	必ず守ること	お子様や、からだの不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必ず周りの方が気を付けてあげてください。 ●事故やトラブルの原因になります。
	必ず守ること	乾電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。
	必ず守ること	使用推奨期限内の乾電池を使用してください。 ●発熱、破裂、液漏れによるケガや周囲汚損の原因になります。
	必ず守ること	乾電池の⊕⊖方向を正しく入れてください。 ●液漏れや破損の原因になります。
	必ず守ること	使い切った乾電池は、すぐに取りはずしてください。 ●液漏れや破損の原因になります。
	必ず守ること	長期間ご使用にならないときは、乾電池を取りはずしてください。 ●液漏れや破損の原因になります。

	注意	乳幼児や自分で操作ができない方、自分で意思表示ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しないでください。 ●事故やトラブルの原因になります。
	禁止	治療中の歯や不安定な入れ歯など口内に気になる症状がある場合は、その部位で使用しないでください。 ●ケガをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
	禁止	一か所に長時間のご使用はおやめください。 ●歯や歯ぐきを痛めるおそれがあります。
	禁止	歯や歯ぐきにブラシを過剰に強く押し当てたり、毛先以外のプラスチック部分を当てないでください。 ●歯や歯ぐきを痛めるおそれがあります。
	禁止	歯磨き剤をつけて使用しないでください。 ●歯や歯ぐきを痛めるおそれがあります。
	禁止	歯周・歯間清掃以外の用途に使用しないでください。 ●故障や破損、事故、ケガの原因になります。
	禁止	歯ブラシを口に入れたまま手を離さないでください。 ●ブラシ部が外れて思わぬケガをするおそれがあります。
	禁止	充電式の電池は使わないでください。 ●発熱し、やけどなどの原因になります。
	禁止	スイッチ(電源)を入れたまま放置しないでください。 ●液漏れ、発熱、破裂などを起こし、本体が破損する原因になります。
	禁止	落としたり、ぶつけたりして本体に強い衝撃を与えないでください。 ●故障や破損の原因になります。
	禁止	本体のお手入れをするときは、ベンジン、シンナー、ガソリン、エタノールなどで拭かないでください。 ●火災や感電、故障の原因になります。

乾電池の入れかた

お願い


- ⊕ ⊖ 方向を正しく入れてください。
- アルカリ単4形乾電池以外の乾電池は使用しないでください。
- 充電式の電池は使わないでください。
- 乾電池を入れるときは、水滴などが中に入らないように本体をよくふき、ぬれた手で行わないでください。
- 長時間ご使用されないときは、電池を取りはずして保管してください。
- 単4形アルカリ乾電池1本で、約1ヶ月ご使用いただけます。(1日2回、1回3分使用の場合)
- 本製品を分解したり、修理したりしないでください。思わぬ事故やトラブルの原因になります。
- 乾電池容量が少なくなってくると、使用時に動作が止まる場合があります。これは故障ではありませんので、お早めに乾電池を新品とお取り替えください。

■ 乾電池は同梱していませんので、別途「単4形アルカリ乾電池(LR03)」をお買い求めください。


必ずスイッチを『切』にして動作を完全に停止させてから行ってください。

1. 電池カバーを取りはずす

- ① 電池カバーの目印が、本体取り付け位置にくるまで電池カバーを回す。
- ② 電池カバーを取りはずす。

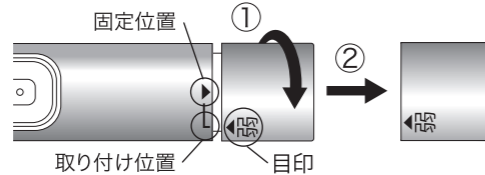


2. 単4形アルカリ乾電池を入れる

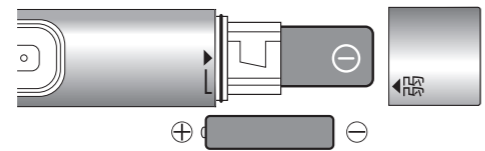

3. 電池カバーを取り付ける

- ① 電池カバーの目印と本体取り付け位置を合わせて差し込む。
- ② 電池カバーの目印が、本体の固定位置にくるまで電池カバーを回す。

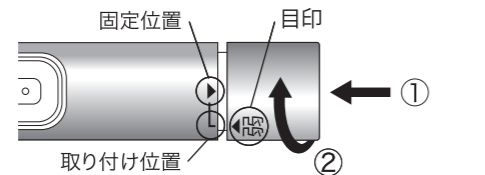

デンタルペッカーの速度調整

お願い

- 使いはじめは〈弱〉からのご使用をおすすめいたします。〈弱〉=子供、はじめての方、歯ぐきが弱っている方、〈強〉=弱では使用感が得られない方、使い慣れた方

電池カバーを取り付ける向きを180度かえることにより、タッピング速度が2段階に調整できます。




毎分約7,000往復



毎分約8,000往復

デンタルペッカーの速度調整の方法

1. 電池カバーを取りはずす
 - ① 電池カバーの目印が、本体取り付け位置にくるまで電池カバーを回す。
 - ② 電池カバーを取りはずす。
2. 取りはずした電池カバーを180度回転させ、タッピング速度を調節する。
3. 電池カバーを取り付ける
 - ① 電池カバーの目印と本体取り付け位置を合わせ差し込む。
 - ② 電池カバーの目印が、本体の固定位置にくるまで電池カバーを回す。

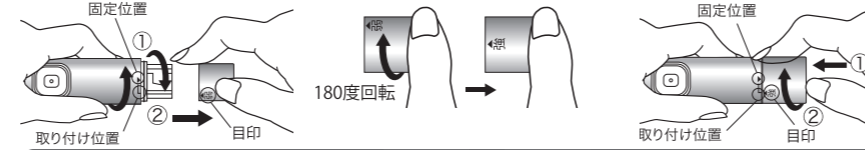

デンタルペッカーの使い方




お願い

- 歯肉炎、歯周病の方は出血することがあります。お客様の歯ぐきが弱っていると思われる。使用時の出血は3～7日程度様子を見ながらご使用ください。それでも歯ぐきから出血が続く場合、または多量の出血などの異常があらわれた場合は、歯科医にご相談ください。
- 口内または歯周について、手術を受けて間もない方、現在治療中の方、傷や炎症などの異常がある方、歯肉炎・歯肉炎のひどい方は歯科医にご相談のうえ、ご使用ください。
- 1回あたり長時間のご使用は避けてください。歯ぐきが浮く感じがすることがあります。1日1～2回、3～5分の目安でご使用ください。
- 一か所に長時間のご使用はおやめください。● ブラシは毛先が汚れたり、曲がったりしたら交換してください。
- 本製品を歯周・歯間清掃以外の用途に使用しないでください。● 歯面清掃は従来の歯ブラシをご利用ください。

通常の歯磨きの後にご使用ください。

歯ブラシでは落としにくい、歯間や歯周ポケットの磨き残しを、スッキリと除去します。

1. 歯みがき剤をつけず、水だけで使用してください。ブラシ先端は水を含むと細くまとまって、歯間に入りやすくなります。
2. スイッチを入れます。スイッチを押し込むと作動し、もう一度押し込むと止まります。
3. 奥歯から前歯に向かって順に使用するとスムーズに運べます。鏡を見ながら行くと、より効果的に汚れを落とすことができます。
4. 歯間部および歯周ポケットへ、ブラシ先端を軽く押し当てて滑るように1本ずつ丁寧に清掃してください。歯周ポケットの清掃の際はブラシの角度は斜め45°が適当です。
5. 毛先は歯に当たると扇状に広がり、毛の1本1本が歯間部、歯周ポケットに入り汚れを除去します。同時に歯肉に対してのマッサージ効果もあります。● 強く押し当てると歯ぐきを傷つけるおそれがあります。ご注意ください。

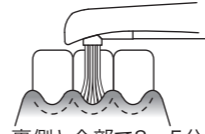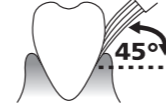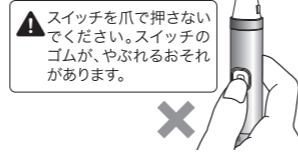

6. 歯の表側、裏側と全部で3～5分くらいが目安です。


使用後のお手入れの方法

〈ブラシ〉 よく水洗いし、水気をきってからキャップに収めてください。

- 毛が抜ける原因になりますので、毛を強く引っ張らないでください。
- 80℃以上のお湯では洗わないでください。

〈本体〉 電池カバーが確実にしまっていることを確認し、水洗いしてください。防水設計のため本体を軽く水洗いできます。水洗い後は、乾いたタオルなどで水分をふきとってください。


- 本体を水の中に放置したり、水没させないでください。(内部に水が入る原因になります)
- 40℃以上のお湯では洗わないでください。

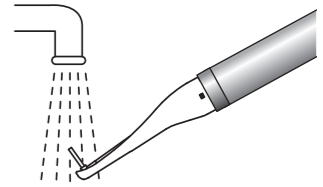

先端ブラシの交換について〈専用替ブラシ12本付属〉

必ずスイッチを『切』にして動作を完全に停止させてから行ってください。

- ① ブラシ部分をつまんで手前に引き出し、
- ② ポールからホルダーごとブラシ部分を引き抜いてください。
- ③ 付属の専用替ブラシをポールに確実に差し込んでください。

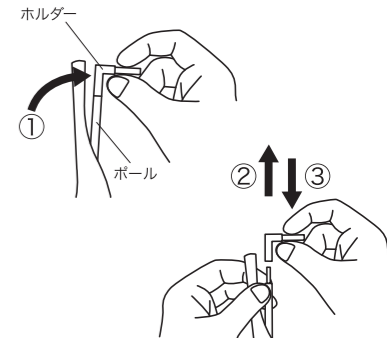

- シャフトとポールをもう片方の手の指で押さえておくと、よりスムーズにブラシを交換できます。
- ブラシは約1か月を目安に新しいものと交換してください。また、毛先が広がったブラシでは、効果的なブラッシングができませんので交換してください。

別売替ブラシ 販売店でお買い求めください。
デンタルペッカー専用替ブラシ12本 DPK-10

製品仕様

製品仕様	
本体の材質	ABS樹脂
柄の材質	ポリアセタール(ポール)、ABS樹脂(ホルダー)
毛の材質	ナイロン
毛のかたさ	かため
耐熱温度	ブラシ部分:80℃
電源方式	乾電池式
乾電池の種類	1.5V単4形アルカリ乾電池(LR03)1本(別売)
振動数	弱:約7,000回/分(無負荷時) 強:約8,000回/分(無負荷時)
重量	約49g(電池除く)
寸法	約167×21×20mm